PROTEC II

POSTE DE PESEE ET DE PRELEVEMENT SECURISE



Conforme à la norme : EN 12 469

TRIPLE PROTECTION : OPERATEUR, MANIPULATION ET ENVIRONNEMENT

Cette enceinte repose sur le principe du Poste de Sécurité Microbiologique de type II A (triple protection).


Elle est destinée à la manipulation et/ ou pesée : de poudres, de produits nocifs, pulvérulents…

CARACTÉRISTIQUES

- *Mise en route d'un seul « clic »*
- *Double enveloppe en dépression (sécurité/aucun risque de fuite)*
- *Volume intérieur inox en une partie (aucune soudure)*
- *Plan de travail en TRESPA amovible (confort d'utilisation/planéité/décontamination)*
- *Vitre à montée et descente motorisées*
- *Filtre avec voile de laminarité*
- *Veine de garde profilée démontable (confort et facilité de décontamination)*
- *Maintenance par l'avant (capot relevable)*
- *Mono-ventilateur E.C.M*
- *Niveau sonore très faible*
- *Affichage LCD (vitesse, colmatage, alarmes)*
- *Surfaces lisses et nettoyables*
- *Prise de courant intégrée en standard*

UTILISATIONS

- *Pharmaceutique*
- *Biotechnologie*
- *Agroalimentaire*
- *Hospitalier*
- *Etc…*

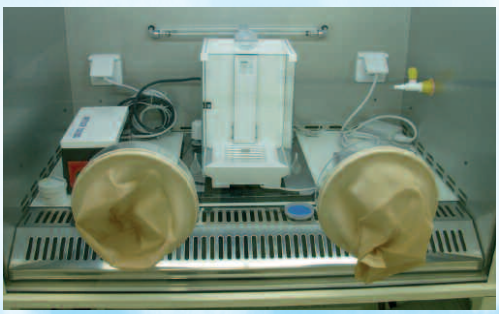

PROTEC II version ISOLATEUR

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE ASSUREES PAR LE CONSTRUCTEUR ADS LAMINAIRE

INF - COM - 05 - Rév1 - "Document non contractuel. Nous nous reservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis"

ADS air dépoussiéré Laminaire stérile laminaire

35, rue Baudin - 93315 Le Pré St-Gervais France
Tél. 01 48 44 74 69 - Fax 01 48 44 14 64

E-mail : info@adslaminaire.com
Web : www.adslaminaire.com

PRINCIPE

Un flux laminaire stérile ISO 5 (selon la norme EN 12469, ou classe 100) est soufflé verticalement sur le plan de travail, après passage sur un filtre absolu HEPA (1) et assure la protection de la manipulation. Le flux d'air est repris intégralement par des perforations périphériques situées sur les parois latérales et sur la paroi arrière de l'enceinte.

Une partie de l'air recyclé est rejetée dans le local à travers un second filtre absolu (2) permettant la protection de l'environnement. La quantité d'air rejetée est compensée par l'aspiration d'un volume d'air équivalent en partie frontale du plan de travail. Cette aspiration, appelée « veine de garde », crée une barrière dynamique assurant la protection du manipulateur.


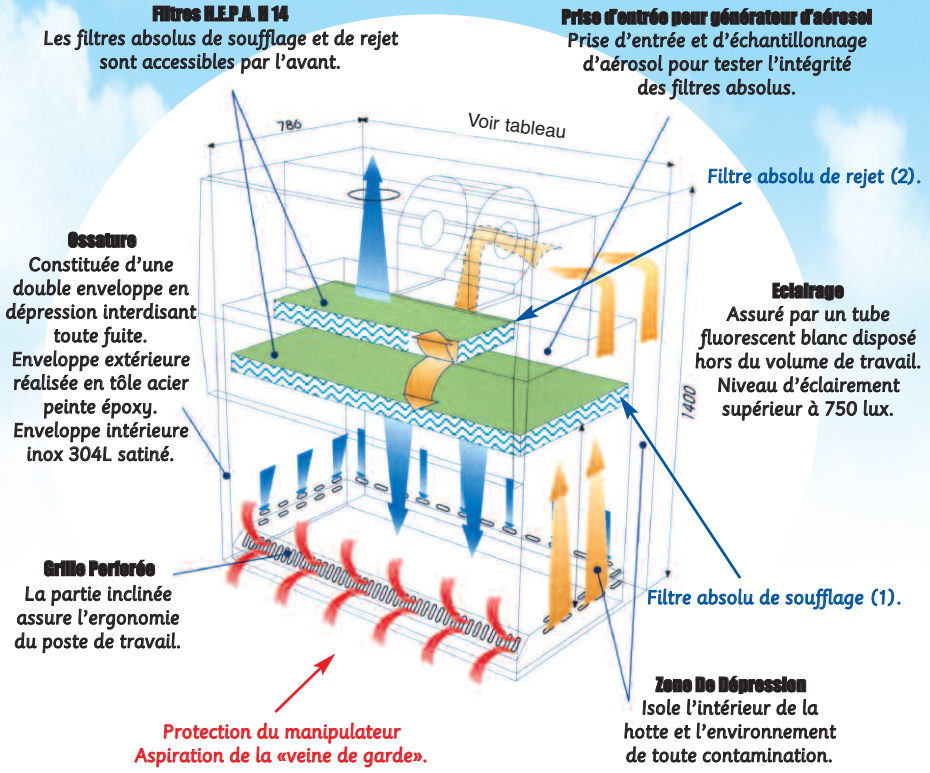


Tableau de commande : voir documentation détaillée

OPTIONS

- Marbre de pesée
- Piètement sur vérins télescopique
- Lampe UV germicide
- Passage fluide (gaz/air/vide)
- Prise de courant supplémentaire
- Plan de travail inox, perforé, en plusieurs parties
- Raccordement vers l'extérieur
- Filtre à charbon actif au rejet
- Préfiltre à la reprise
- SAS déchets
- Configuration "Boîte à gants (BAG) - ISOLATEUR"
- Régulation de température et/ou d'hygrométrie

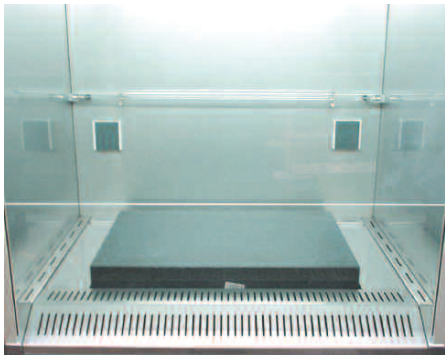

Marbre de pesée pour précision 0.01 mg



Préfiltre à la reprise

DIMENSIONS

	PROTEC 92		PROTEC 122		PROTEC 162		PROTEC 182	
Dimensions (mm)	Utiles	Hors tout	Utiles	Hors tout	Utiles	Hors tout	Utiles	Hors tout
Largeur	921	971	1226	1276	1531	1581	1836	1886
Hauteur	Utiles 650		Hors Tout 1400					
Profondeur	Utiles 616		Hors Tout 786					
Poids (Kg)	190		230		300		350	
Puissance (W)	1,4		1,4		1,5		1,5	

Hauteur hors tout sur piètement standard 2240 mm.

Documents :

Les documents suivants sont remis à la livraison :

- Certificat de conformité
- Certificat de garantie
- Livret d'utilisation en Français

INF - COM - 05 - Rév1. "Document non contractuel. Nous nous reservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis"

ADS air dépoussiéré Laminaire stérile laminaire

35, rue Baudin - 93315 Le Pré St-Gervais France
Tél. 01 48 44 74 69 - Fax 01 48 44 14 64

E-mail : info@adslaminaire.com
Web : www.adslaminaire.com